





















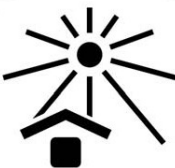



## Meditsiiniseadmete märgistusel kasutatavad graafilised sümbolid

	<p>Kõik meditsiiniseadmed Eesti turul peavad omama CE märki (va. Tellimusmeditsiiniseadmed ja kliinilise uuringu seadmed) Märk pannakse seadmele või seadme kasutusjuhendisse.</p>	
	<p>„Tootja”</p>	<p>Sümbolile lisatakse ettevõtte nimi ja aadress</p>
	<p>„Volitatud esindaja Euroopa Liidus”</p>	<p>Sümbolile lisatakse ettevõtte nimi ja aadress, kes esindab kolmandates riikides asuvat tootjat Euroopa Liidus</p>
	<p>„Tootmise kuupäev”</p>	<p>Sümbolile lisatakse seadme tootmise aeg. Tootmise aeg võib olla esitatud aasta ja kuu või aasta, kuu ja päeva täpsusega</p>
	<p>„Seerianumber”</p>	<p>Seadme seerianumbrit kasutatakse kindla toote identifitseerimiseks. Number lisatakse sümboli järele või alla.</p>
	<p>„Partii”</p>	<p>Seadme partiinumbrit kasutatakse meditsiiniseadme partiide identifitseerimiseks. Number lisatakse sümboli järele või alla.</p>
	<p>„Katalooginumber”</p>	<p>Tootja toodete kataloogis seadme number lisatakse sümboli järele või alla.</p>
	<p>„Kasutada kuni”</p>	<p>Meditsiiniseadet võib sihtotstarbeliselt kasutada kuni ... (sümbolile lisatud lõppaeg). Ohutu kasutamise lõppaeg võib olla esitatud aasta, aasta ja kuu või aasta, kuu ja päeva täpsusega</p>
	<p>„Ühekordselt kasutatav seade”</p>	<p>Meditsiiniseadet võib kasutada üks kord vaid ühe patsiendi peal.</p>

	<p>„Steriilne”</p>	<p>Sümbol tähistab steriilselt turul olevaid meditsiiniseadmeid</p>
	<p>„Steriilne, steriliseeritud kuumõhuga”</p>	<p>Sümbol tähistab steriilselt turul olevaid meditsiiniseadmeid. Steriliseeritud autoklaaviga</p>
	<p>„Steriilne, steriliseeritud etüleenoksiidiga”</p>	<p>Sümbol tähistab steriilselt turul olevaid meditsiiniseadmeid. Steriliseeritud etüleenoksiidiga</p>
	<p>„Steriilne, steriliseeritud kiirgusega”</p>	<p>Sümbol tähistab steriilselt turul olevaid meditsiiniseadmeid. Steriliseeritud kiirgusega</p>
	<p>„Steriilne, kasutati aseptilist tootmisprotsessi”</p>	<p>Sümbol tähistab steriilselt turul olevaid meditsiiniseadmeid</p>
	<p>„Mittesteriilne meditsiiniseade”</p>	<p>Sümbolit kasutatakse mittesteriils meditsiiniseadmete eristamiseks temaga sarnastest või lähedastest steriilsetest meditsiiniseadmetest</p>
	<p>„Steriilne vedeliku voolutee”</p>	<p>Vedeliku voolutee on meditsiiniseadmel steriliseeritud. Seadme muud osad sh välimised osad võivad olla mittesteriliseeritud</p>
	<p>„Mitte resteriliseerida”</p>	<p>Meditsiiniseade on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Seade mitte resteriliseerida</p>
	<p>„Seade sisaldab naturaalselateksit”</p>	<p>Meditsiiniseade või pakend on naturaalsest lateksist valmistatud või sisaldab naturaalselateksit</p>

	<p>„Ettevaatust!“</p>	<p>Enne kasutamist peaks tutvuma seadmega kaasas oleva dokumentatsiooniga. Tähelepanu peab pöörama hoiatustele ja kasutamise erijuhistele</p>
	<p>„Uuri kasutusjuhendit!“</p>	<p>Enne meditsiiniseadme kasutamist tuleb lugeda seadme kasutusjuhendit</p>
	<p>„<i>In vitro</i> diagnostikameditsiiniseade“</p>	<p>Viitab seadmele, mida kasutatakse <i>in vitro</i> diagnostilise meditsiiniseadmena</p>
	<p>„Võimalike testide arv“</p>	<p>Pakendi sisu jätkub &lt;n&gt; testi jaoks. Sümbolist paremale või alla lisatakse number, mitu testi saab selle reagendi kogusega läbi viia.</p>
	<p>„Temperatuuri piirang“ (ülalpoolt ja/või altpoolt)</p>	<p>Meditsiiniseadet ei tohi kasutada/ladustada ülevalpool ülemist temperatuuri piirangut ja/või allpool alumist temperatuuri piirangut. Märk võib esineda ka kujul, kus on toodud ainult üks piirangutest.</p>
	<p>„Bioloogiline hädaoht“</p>	<p>Viitab meditsiiniseadmest tuleneva potentsiaalsele bioloogilisele riskile.</p>
	<p>„Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud“</p>	<p>Meditsiiniseadet ei tohi kasutada, kui pakend on avatud või kahjustunud.</p>
	<p>„Purunemisoht, käsitleda ettevaatlikult“</p>	<p>Meditsiiniseade võib puruneda või kahjustuda, kui seadet ei hoita ettevaatlikult.</p>
	<p>„Hoida otsese valguse eest“</p>	<p>Meditsiiniseadet tuleb hoida otsese ja intensiivse valguse eest</p>

	<b>„Hoiä kuivas”</b>	<b>Tähistab meditsiiniseadmeid, mida tuleb hoida niiskuse eest.</b>
---	----------------------	---

**Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust meditsiiniseadmete osakonnaga.**